



**BRUGSANVISNING**

Denne brochure har til hensigt at informere brugere af Bausch + Lomb daily disposable hydrofile bløde kontaktlinser om, hvordan de skal bruge og pleje deres linser.

Den gælder for:

PRODUKTNAVN	MATERIALE	VANDINDHOLD	PAKKENS VÆSKE
SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug	Hilafilcon B	59 % efter vægt	Boratbufferet saltvand med poloxamin
SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug			
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmetisk farvede kontaktlinser til daglig brug			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug	Nesofilcon A	78 % efter vægt	
Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Håndteringsfarvede kontaktlinser til daglig brug			
Biotrue® ONEday For Astigmatism (nesofilcon A) håndteringsfarvede kontaktlinser			

**Indikation**

Bausch + Lomb (hilafilcon B og nesofilcon A) kontaktlinser er endagslinser til korrigerende af refraktiv ametropi (myopi, hypermetropi, astigmatisme), presbyopi og reduktion af sfærisk aberration hos afake og/ eller ikke-afake personer med raske øjne, som har en refraktiv astigmatisme på 2,00 dioptrier eller mindre (SofLens® daily disposable Toric og Biotrue® ONEday For Astigmatism op til 5.00 dioptrier) som ikke forringer synsstyrken. Linsen ordineres til engangsbrug i sfæriske styrker fra + 20,00 D til -20,00 D og skal kasseres efter brug.

**Beskrivelse og anvendelse**


Linserne er beregnet til daglig engangsbrug og skal kasseres, når de er blevet brugt. Hvis de anvendes igen uden at være rensede og desinficeret, kan det føre til infektion og/eller alvorlige øjensygdomme. Følg altid din øjenspecialists anvisninger.

**STERILE** Linserne leveres sterile og er fra producentens side beregnet til at blive brugt maksimalt én dag. Linserne er dampsteriliserede.

Anvend IKKE linserne, hvis pakken har været åbnet eller er beskadiget.

**Instruktioner om isættelse og fjernelse**

Før linserne håndteres, skal du altid vaske og tørre hænderne grundigt og undgå sæber med parfume eller medicin. Hæld linsen ned i din håndflade. Sørg for, at linsen vender rigtigt.

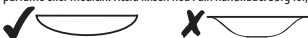

Kontroller linsen, før du sætter den i øjet. Sæt ikke linsen i øjet, hvis den er ridset eller beskadiget.

Før du fjerner linsen, skal du sørge for, at dine hænder er rene og tørre. Brug fingeren til at skubbe linsen ned til øjets hvide del, hvor du så kan fjerne den. Anvend fugtdråber, hvis det er vanskeligt at fjerne linsen. Kassér altid linsen, når du har fjernet den fra øjet.

**Pleje af dine linser**

- Vask altid hænder og skyl dem, før du håndterer dine linser
- Der må ikke komme kosmetik, lotion, sæbe, creme eller parfume i øjnene eller på linserne
- Du må aldrig anvende skarpe genstande eller fingernegle til at fjerne linserne fra beholderen eller fra øjnene
- Linserne skal altid kasseres, når de er blevet fjernet fra øjet

**Forholdsregler og advarsler**

Hvis du ikke følger din øjenspecialists anvisninger for brug og rensning, kan det føre til større risiko for alvorlige øjeninfektioner.

Kontaktlinser til daglig engangsbrug må ikke anvendes mere end én dag og må ikke anvendes når du sover.

Anvend ikke kontaktlinser, hvis du lider af følgende:

- Allergi, betændelse, infektion eller rødme i eller omkring øjnene
- Tørre øjne (utilstrækkelig tårevæske)
- Dårligt helbred, der påvirker øjnene (f.eks. forkølelse og influenza)
- Enhver systemisk lidelse, der påvirker øjnene

Kontakt din øjenspecialist, før du begynder at bruge kontaktlinser:

- Hvis du skal dyrke vandsport
- Hvis du er i meget tørre eller støvede omgivelser
- Hvis du bruger øjenmedicin

Hvis du oplever et af følgende problemer, skal du omgående tage din linser ud:

- Hvis øjnene prikker, brænder, klør eller er irriterede, eller hvis du har andre øjensmerter
- Hvis du føler ubehag sammenlignet med tidligere brug
- Hvis der kommer sekret eller meget vand ud af øjnene
- Hvis øjnene er røde
- Hvis øjnene er meget tørre eller er tørre hele tiden
- Hvis du oplever reduceret eller sløret syn
- Hvis du oplever regnbuer eller haloer omkring lys
- Hvis du bliver følsom over for lys

Hvis et af disse symptomer fortsætter, efter du har fjernet de gamle linser og sat nye i, skal du fjerne linserne og kontakte din øjenspecialist. Disse symptomer kan føre til mere alvorlige sygdomme, hvis de ignoreres.

**Yderligere advarsler og forholdsregler for Biotrue ONEday kontaktlinser (nesofilcon A)**

**Advarsel:** UV-absorberende kontaktlinser kan IKKE erstatte UV-beskyttende briller eller UV-beskyttende solbriller, da de ikke fuldstændigt dækker øjet og det omgivende område. Du skal blive ved med at bruge UV-beskyttende briller, som anvist.

**Bemærk:** Langvarig eksponering til UV-stråling er en af de risikofaktorer, der er forbundet med katarakter. Eksponering baseres på flere forskellige faktorer, som f.eks. miljøforhold (højde, geografi, skydække) og personlige faktorer (omfanget og karakteren af udendørs aktiviteter). UV-blokerende kontaktlinser kan hjælpe med at beskytte mod skadelig UV-stråling.

**Bemærk:** Effekten af at anvende UV-absorberende kontaktlinser med henblik på at forhindre eller reducere forekomsten af øjenlidelser forbundet med eksponering til UV-lys er ikke blevet fastlagt. Der er ikke udført kliniske studier, der viser, at anvendelsen af UV-blokerende kontaktlinser kan reducere risikoen for at udvikle katarakter eller andre øjenlidelser. Kontakt din øjenspecialist for mere information.

**Referencevejledning til symboler på mærkater og æsker**



Betalt gebyr for affaldshåndtering i henhold til 94/62/EØF



Bausch & Lomb Incorporated  
1400 North Goodman Street  
Rochester NY, 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Udstedelsesdato: 2017-07-26



Angiver mærkning for CE-overensstemmelse samt nummer på bemyndiget instans



Må ikke genbruges



Laveste temperatur ved opbevaring



Se produktinformation



Symbol for steril og varmesterilisering



Kun for USA: Bemærk Ifølge føderal lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller på ordination af en autoriseret behandler.

®/™ angiver varemærker tilhørende Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated